



## **NETTOYAGE DE ROUTINE**

### **Documents nécessaires**

- Chapitre NETTOYAGE DE ROUTINE page 1–6 du mode d'emploi 8.0/9.0 applicable au SV300/300A

### **Matériels ou outils nécessaires**

- Filtre bactérien pour test
- Ballon test
- Bac de trempage avec Firstinald
- Filtre avec raccord et tuyau

### **Définition et description des tâches**

- **Désassemblage** : C'est le démontage du circuit expiratoire
- **Nettoyage** : C'est le trempage du transducteur dans une solution d'alcool et des autres pièces dans une solution de Firstinald selon protocole CLIN "B1" relatif à l'entretien des dispositifs médicaux et chirurgicaux (Désinfection de bas niveau actuellement par le Firstinald 0,5%)
- **Stérilisation** : Selon le protocole en vigueur au CH de Mulhouse au niveau du Service de la stérilisation
- **Assemblage** : C'est le remontage des différentes pièces
- **Tracabilité** : C'est l'inscription dans l'outil de gestion de la maintenance de l'Atelier Biomédical.

### **Pièces au rebut**

- Filtre avec raccord et tuyau

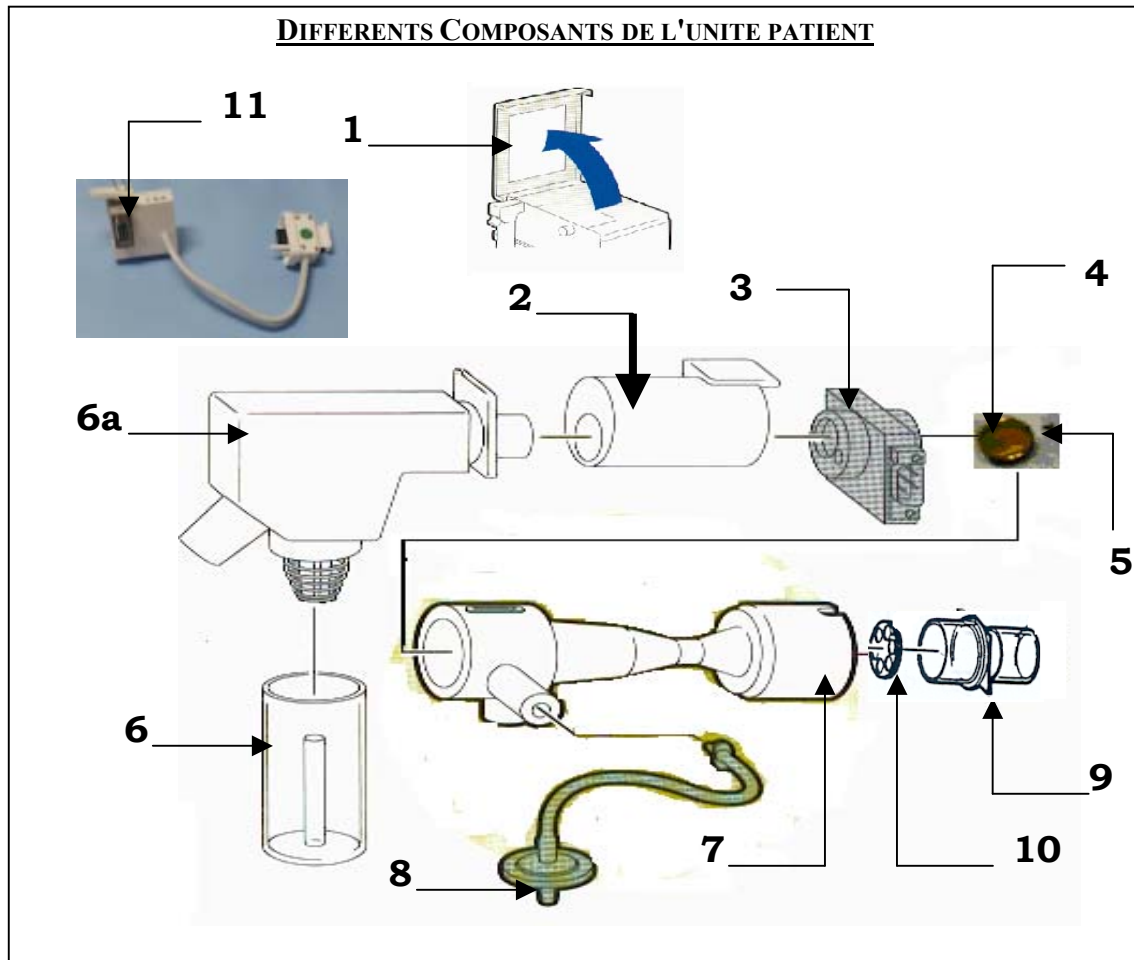
### **Personnel requis**

- Technicien Biomédical

### **Périodicité**

- Après chaque patient

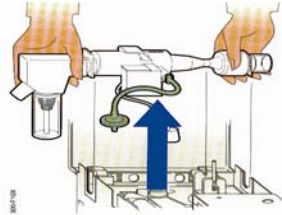
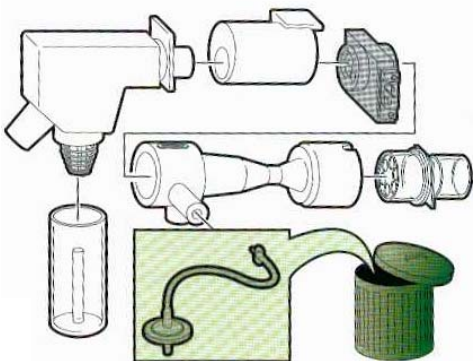
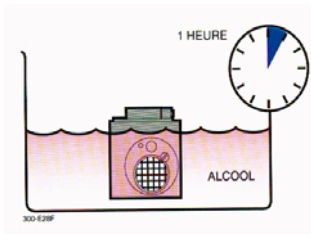
La partie fondamentale qui nous concerne dans le cadre de l'élaboration des procédures est le circuit patient. Pour tout type de maintenance à titre préventive, il est procédé à la stérilisation du circuit patient et au remplacement de diverses pièces.

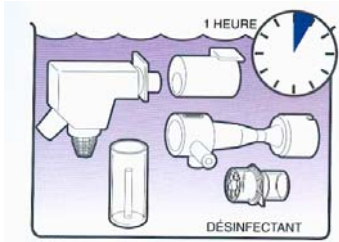
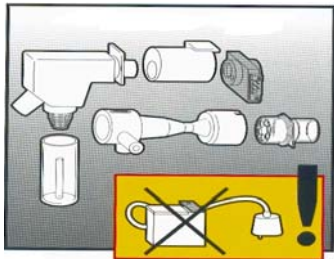
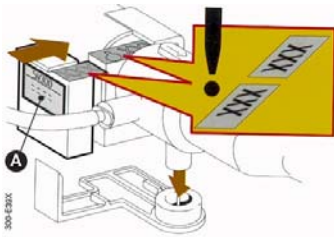


## LEGENDE

- 1** : Unité patient
- 2** : Tube de connexion expiratoire
- 3** : Transducteur de débit
- 4** : Grille du transducteur de débit
- 5** : Vis de la grille du transducteur de débit
- 6** : Flacon piège
- 6a** : Entrée expiratoire
- 7** : Valve expiratoire
- 8** : Filtre bactérien avec tuyau vert
- 9** : Support de la Valve de contrôle de non-retour de flux expiratoire
- 10** : Valve de contrôle de non-retour de flux expiratoire
- 11** : Amplificateur de débit

## Etapes de réalisation

Etapes	Actions à réaliser
<p style="text-align: center;"><b>DESASSEMBLAGE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ouvrir le couvercle de l'unité patient (1)</li> <li>▪ Enlever le filtre bactérien avec tuyau (8)</li> <li>▪ Appuyer sur le ressort pour ouvrir la valve expiratoire (7)</li> <li>▪ Soulever l'ensemble du canal expiratoire formé l'ensemble (2, 3, 7, 9,) et le sortir</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déconnecter le transducteur de débit (3) de son amplificateur (11)</li> <li>▪ Désassembler le canal expiratoire formé l'ensemble (2, 3, 7, 9,) et jeter le filtre bactérien avec tuyau (8)</li> </ul> 
<p style="text-align: center;"><b>NETTOYAGE</b></p>	<p style="text-align: center;">⇒ <u>Du transducteur de débit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laisser tremper le transducteur de débit 3 dans une solution à 70% d'alcool pendant une heure environ <i>dans le bac orange sur la paillasse de la salle de nettoyage de l'atelier.</i></li> </ul> 

	<p style="text-align: center;">⇒ <b><u>Les autres pièces</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laisser tremper tous les éléments <b>2</b>, <b>6</b>, <b>6a</b>, <b>7</b> et <b>9</b> dans du Firstinald à 0,5% pendant 15 minutes <i>dans le bac gris de la salle de nettoyage de l'atelier</i></li> </ul> 
<p style="text-align: center;"><b>STERILISATION</b></p>	<p><i>Une fois les pièces nettoyées, rincées et séchées, elles sont mises dans des sachets avant d'être envoyées en stérilisation au niveau -1 EMI</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stériliser toutes les pièces à l'autoclave selon le protocole en vigueur au CH de Mulhouse</li> </ul> 
<p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLAGE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifier que la grille dans le transducteur n'est ni obstruée ni endommagée, et que le disque dans le petit canal est correctement positionné</li> <li>▪ Vérifier que la valve antiretour est bien positionnée dans la sortie expiratoire</li> <li>▪ Assembler le canal expiratoire avec un filtre bactérien neuf <b>8</b>, y compris le raccord et le tuyau</li> <li>▪ Raccorder le transducteur de débit <b>3</b> à son amplificateur <b>11</b></li> <li>▪ Vérifier que : <ul style="list-style-type: none"> <li>~ les numéros d'identification du transducteur et de l'amplificateur coïncident</li> <li>~ les numéros de série de l'amplificateur (Etiquette A) et du ventilateur coïncident</li> </ul> </li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mettre en place l'ensemble du canal expiratoire</li> <li>▪ Vérifier que la valve expiratoire <b>7</b> n'est pas ni courbée, ni torsionnée</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fermer la valve expiratoire</li> <li>▪ Monter le filtre bactérien <b>8</b></li> <li>▪ Mettre en place un circuit patient stérile avec un filtre bactérien stérile sur la pièce Y</li> </ul>
<b>CONTROLE DE FONCTIONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Voir Procédure N°02-005CF_PMR_SV300 relative au contrôle de fonctionnement (cf. Chapitre CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT page 1–34 du mode d'emploi 8.0/9.0 applicable au SV300/300A)</i></li> </ul>
<b>TRAÇABILITE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Noter dans l'outil de gestion de la maintenance que <b>le nettoyage de routine a été fait.</b></li> </ul>